



1

## Prepare for sample collection

Write the patient name, date of birth, phone number, and date of collection on the container(s), as well as on the label inside top pocket of the kit.



## Sample collection

Obtain scoops of stool from areas which appear bloody, slimy, or watery and enough to fill to the red line in the sample container(s). If the stool is formed (hard), take sample amounts from each end, and the middle. Mix with the contents in the container(s) with the spoon, twist the cap tightly closed, and shake until contents are well mixed.



2

3

## Package Specimen for Shipping

- Ensure sample container(s) are tightly closed and label is completed with patient information (see #1).
- Place container(s) in biohazard bag and then place bag with the containers into the bottom of the box.
- Activate instant cold compress and place it in the box.
- Please ensure that all paperwork is also included in the box before sealing and shipping.
- Place the box in the pre-labeled FedEx envelope.

Call FedEx at [1-800-463-3339](tel:1-800-463-3339) to schedule a same-day pickup. Please mention that you have a pre-paid FedEx express package.

Package may also be dropped off at any FedEx drop-off location.

Please note, FedEx does not pickup shipments on Saturday or Sunday.


*We recommend collecting the sample and dropping off the shipment to a FedEx location on a weekday so your sample may be processed in a timely manner. Please retain a copy of your tracking information for reference.*



Follow the instructions on the back. Squeeze firmly and APPLY HIGH PRESSURE toward the inner fluid pouch to break.

Fold and insert in box

Pre-paid FedEx label

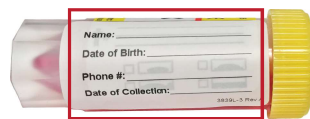

1

## Prepárese para la recolección de muestras

Escriba el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, el número de teléfono y la fecha de recolección en los recipientes, así como en la etiqueta dentro del bolsillo superior del estuche.



Si recibió 3 recipientes, llénelos todos.

**NO LLENE LOS RECIPIENTES POR ENCIMA DE LA MARCA DE LA LÍNEA ROJA.**

## Recolección de muestra

Obtenga cucharadas de heces de áreas que parezcan sangrientas, baboso o acuoso y suficiente para llenar hasta la línea roja en el contenedor(es) de muestra.

Si la materia fecal está formada (dura), tome cantidades de muestra de cada extremo y del medio. Mezcle con el contenido en el recipiente con la cuchara, gire la tapa para cerrar herméticamente y agite hasta que el contenido esté bien mezclado.



2

3


## Embalaje de la muestra para su envío

- Asegúrese de que los recipientes de muestra estén bien cerrados y que la etiqueta esté completa con la información del paciente.
- Coloque los contenedores en la bolsa de riesgo biológica y luego coloque la bolsa con los contenedores en el fondo de la caja.
- Active la compresa fría instantánea y colóquela en la caja.
- Asegúrese de que toda la documentación también esté incluida en la caja antes de sellarla y enviarla.
- Coloque la caja en el sobre preetiquetado de FedEx.

Llame a FedEx al 1-800-463-3339 para programar una recogida el mismo día. Mencione que tiene un paquete FedEx prepago. El paquete también se puede dejar en cualquier lugar de entrega de FedEx. Tenga en cuenta que FedEx no recoge envíos los sábados ni los domingos.



Siga las instrucciones que están al dorso. Apriete firmemente y APLIQUE ALTA PRESIÓN hacia la bolsa de líquido interior para romperla.

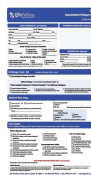

Etiqueta de prepago de FedEx.